

Poltrona Elétrica para Hemodiálise

VLT-521 PRO



Tecnologia e Inovação Transformando o Cuidado Médico



VLT-521 PRO

Poltrona Elétrica para Hemodiálise

Poltrona reclinável em qualquer posição, por meio de sistema deslizante com travamento. A peseira possui movimentos independentes do encosto por meio de alavanca lateral e conta com sistema retrátil, para facilitar o acesso a poltrona.

ESTOFAMENTO

Assento em espuma D-28 Soft não deformável, encosto D-26 Soft e revestimento em couro sintético. Base do assento e encosto em molas zig-zag com supressor de ruído, tornando o conjunto mais confortável e silencioso.

MOVIMENTOS


Encosto reclinável em qualquer posição, por meio de sistema deslizante com travamento. A peseira possui movimentos independentes do encosto por meio de alavanca lateral, e conta com sistema retrátil que se esconde completamente abaixo do assento, para facilitar o acesso a poltrona. Possui ainda um sistema extensor, que amplia sua área à medida em que é elevada, proporcionando mais conforto as pernas. Encosto de cabeça com ajuste de profundidade (simulando travesseiro) para melhor posicionamento do usuário.

BASES

Em aço inox ou aço carbono, dependendo da escolha do cliente. Possui sapatas niveladoras para melhor ajuste ao piso.

PINTURA

Eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva por meio de processo nano-cerâmico de fosfatização.

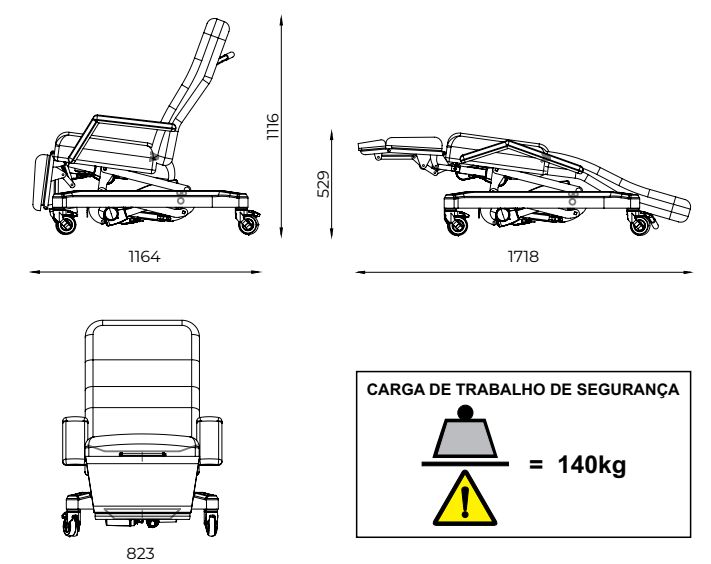



Segurança e Autonomia

Minimiza riscos ao proporcionar apoio ativo e segurança ao paciente ao se levantar da poltrona

VLT-521 PRO

Poltrona Elétrica para Hemodiálise

Especialmente projetada para proporcionar máximo conforto e praticidade em ambientes médicos. Equipada com tecnologia avançada, oferece quatro posições pré-programadas essenciais, que atendem às diferentes necessidades clínicas e facilitam a rotina hospitalar:

Posição Horizontal de Exame

Mantém a poltrona completamente horizontal, oferecendo um suporte ideal para exames e procedimentos clínicos, garantindo facilidade e precisão durante o atendimento ao paciente.



Posição Trendelenburg

Acionada facilmente por um botão dedicado, esta posição oferece uma inclinação de 12°, fundamental para intervenções médicas emergenciais ou específicas, melhorando significativamente o acesso e as condições clínicas do paciente.



Posição de Auxílio à Saída do Paciente

Programada para facilitar o movimento de saída, proporcionando apoio ativo e segurança ao paciente ao se levantar da poltrona, minimizando riscos e aumentando a autonomia do usuário.



Posição Padrão

Retorna rapidamente a poltrona para a configuração inicial padrão, assegurando praticidade e eficiência operacional ao ambiente hospitalar.





Inovando em Segurança Hospitalar



BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO



A Bureau Veritas Company



A Bureau Veritas Company

Autorização de funcionamento junto ao Ministério da Saúde / Agência Nacional de
Vigilância Sanitária nº 801.056-7.