


TEB MTT

Módulo de Software para acompanhamento e registro de exames "Tilt Test"

O que é?

É um programa (módulo de software) para ser usado em conjunto com os programas dos eletrocardiógrafos TEB ECGPC ou TEB C30+.

É fornecido com disco e pen-drive para instalação, manual e chave de segurança.

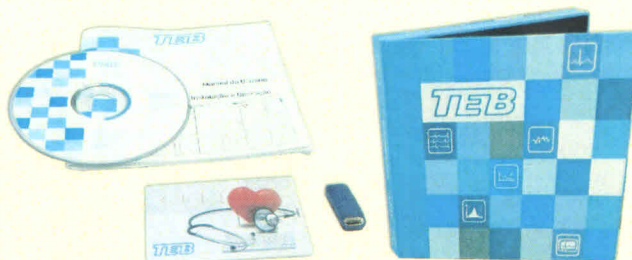


O que faz?

A partir do ECG captado pelo eletrocardiógrafo e dos valores de pressão, medidos por monitor de pressão compatível:

- possibilita a visualização e gravação contínua do ECG em 12 derivações e do valor da FC.
- adquire automaticamente os valores medidos pelo monitor de pressão
- mostra a evolução gráfica dos valores de FC, PAS e PAD durante o teste.
- identifica no gráfico as mudanças de fase, horizontal, inclinada, Trendelenburg e sensibilização.
- permite a anotação de sintomas, minuto a minuto.
- imprime relatório final com logo da instituição, com espaço para anotações e laudo.

Quais as vantagens?

Elimina o trabalho repetitivo de anotações manuais durante o teste.
Oferece perfeita correlação temporal entre os eventos do teste e o registro eletrocardiográfico.
Permite uma cuidadosa análise e documentação eletrocardiográfica.
Elimina o trabalho de realização dos gráficos e facilita o laudo final.

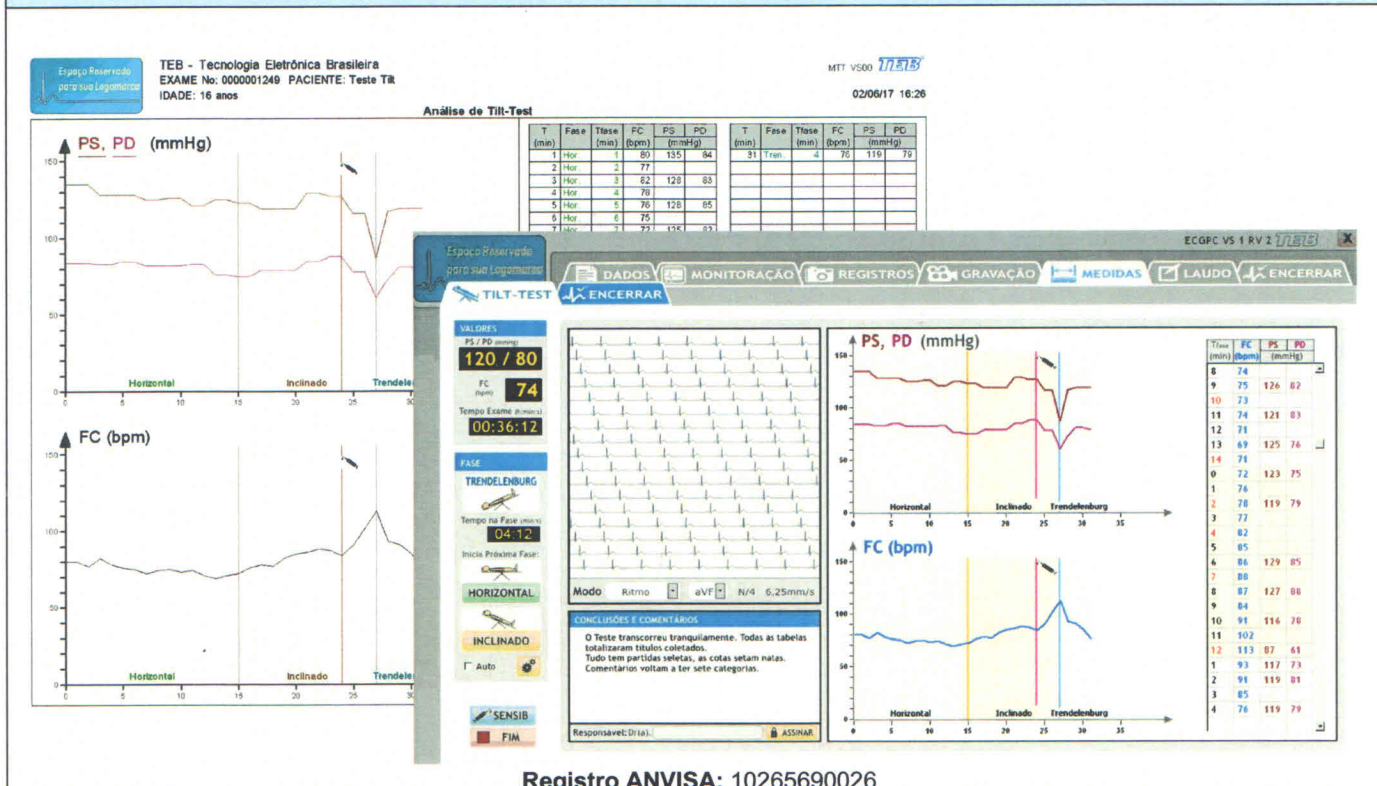

Quais eletrocardiógrafos podem ser usados?

TEB ECGPC ou TEB C30+



ECGPC – a partir de Agosto de 2015

C30+ – a partir de 2016

Quais monitores de pressão podem ser usados?

- Geratherm DESKTOP 2.0
- Alfamed VITA 200
- Suntech Tango

Os valores de pressão também podem ser digitados manualmente. (*)