




PROLIFE

tecnologia a serviço da medicina

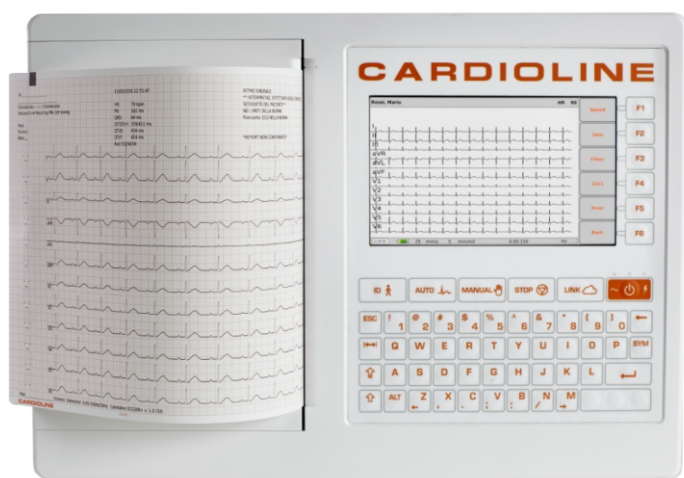

Peso: 2,6 kg


Eletrocardiógrafo ECG200S

O ECG200S é um eletrocardiógrafo de 12 derivações simultâneas, robusto e completo. Possui tela de 7", impressora termossensível formato A4 com possibilidade de impressão em 3, 6 ou 12 canais. Os dados podem ser enviados pelo botão LINK para o software ECG EasyApp, que permite importar, analisar, laudar e organizar os exames, além de permitir impressões futuras.

Diferenciais:

- Memória de 100 exames, opcional expansão para 1000 exames;
- Opcional exportação de exames via LAN ou WiFi;
- Facilidades para integrações;
- Permite revisar e imprimir exames;
- Detecção de marca-passo e eletrodos soltos;
- ECG emergencial;
- Canal de ritmo: DII longo;
- Teclado de membrana de fácil higienização.

Seu Kit ECG200S é composto por:

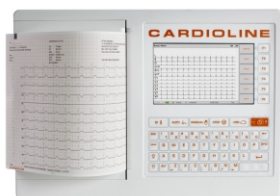

ECG200S



Cabo paciente
tipo banana 10 vias




Kit eletrodo
tipo pêra




Kit cardioclip adulto



Fonte de alimentação

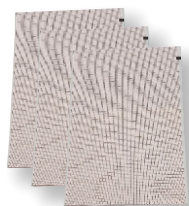

3 blocos de papel z-fold
A4 termossensível

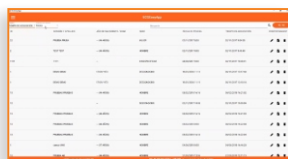

Software de análise
ECG EasyApp

Especificação para utilização do software ECG EasyApp

Sistema Operacional: Windows 7 32/64 bits, ou superior
Processador: Intel 2GHz ou superior
Memória RAM: 4GB ou superior
Espaço no disco rígido: 8GB ou superior
Tamanho de tela: 15" (18,5" recomendado)
USB: 1x 2.0
PDF reader instalado



TECNOCLIN